

# FOREO

## ISSA™

### VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEINFORMATION

#### EINE REVOLUTIONÄRE ZAHNBÜRSTE, DIE IHR LÄCHELN ZUM STRAHLEN BRINGT

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses FOREO Produktes. Sie haben damit den ersten Schritt zu einem weißeren und strahlenden Lächeln getan. Bevor Sie alle Vorzüge unserer Dentalentwicklung komfortabel zuhause genießen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit für diese Anleitung. Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Benutzer muss in der Lage sein, die Bedienungsanleitung zu lesen.



**WARNUNG:** Eine Veränderung dieses Gerätes ist nicht erlaubt.

Verwendungszweck: Die elektrische Zahnbürste ISSA™ ist für den Zahnpflege-Einsatz zur Förderung der allgemeinen Mundhygiene, einschließlich der Reinigung und Entfernung von Verfärbungen und Zahnbelägen, vorgesehen. Die pflegenden Silikonborsten sind ultra-hygienisch, da sie resistent sind gegen Bakterienanhaftung. Der weiche Silikon-Bürstenkopf ist besonders schonend für Zähne und Zahnfleisch und bietet eine angenehme Zahnfleischmassage.

#### ISSA™ ÜBERBLICK

Die ISSA™ ist die weltweit erste elektrische Zahnbürste vollständig aus Silikon. Durch die revolutionäre Kombination von Hochintensitäts-Pulsationen mit Silikonborsten, liefert sie eine komplett gründliche Mundpflege. Zahnbelag und Zahnverfärbungen werden entfernt, Karies wird vorgebeugt und das Zahnfleisch wird gleichzeitig massiert. Die Silikonborsten sorgen für eine effektive und dennoch sanfte Reinigung; so wird dem Zahnfleischschwund vorgebeugt und der natürliche Zahnschmelz wird nicht beschädigt. Die ISSA™ wird benutzt wie eine normale Handzahnbürste. Die besten Ergebnisse werden erzielt mit einer zweimal täglichen Anwendung von jeweils zwei Minuten.

#### WICHTIG

##### AUSTAUSCH ISSA™ BÜRSTENKÖPFE

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch und befolgen Sie genau die Anweisungen, um den Bürstenkopf ohne Schädigung des Gerätes auszutauschen.

Verwenden Sie nur FOREO's ISSA™ Bürstenköpfe bei Ihrem Gerät.


**BEIM WECHSELN DES BÜRSTENKOPFES DEN HANDGRIFF UND DEN BÜRSTENKOPF NICHT DREHEN.**

Ziehen Sie den gebrauchten Bürstenkopf gerade nach oben ab. Stecken Sie den neuen Bürstenkopf gerade auf und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis kein Zwischenraum zwischen Bürste und Handgriff mehr sichtbar ist. Zu keiner Zeit verdrehen.




**WARNUNG:** Abnehmbare Teile (Bürstenköpfe) können verursachen:

- Allergiesymptome
- Schäden an bestehenden Verletzungen

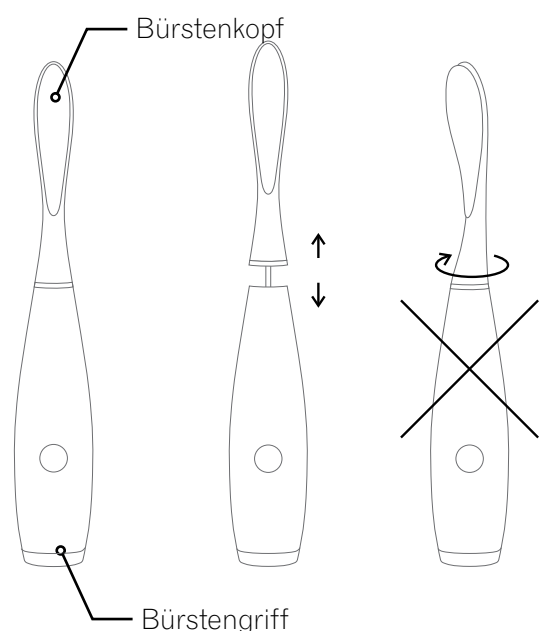


## NUTZUNG DER ISSA™


Das Zähneputzen mit der ISSA™ fühlt sich extrem sanft an – aber genau so soll es sich anfühlen. Halten und verwenden Sie die ISSA™ in der gleichen Art und Weise, als ob Sie mit einer normalen manuellen Handzahnbürste Ihre Zähne putzen würden.

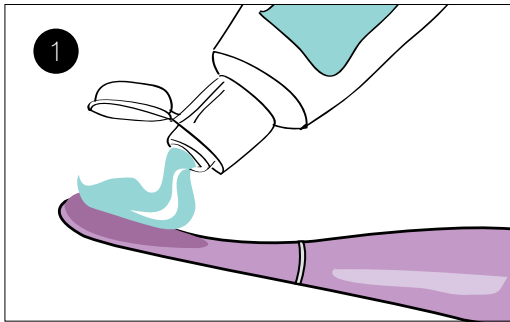


1. Verwenden Sie Ihre gewöhnliche Zahnpasta.

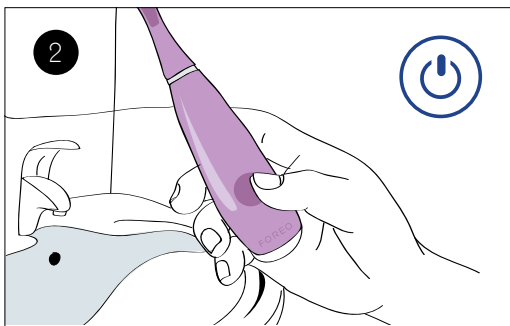




2. Drücken Sie die mittlere Taste, um einzuschalten. Während Sie die Taste drücken, leuchtet das LED-Licht auf.

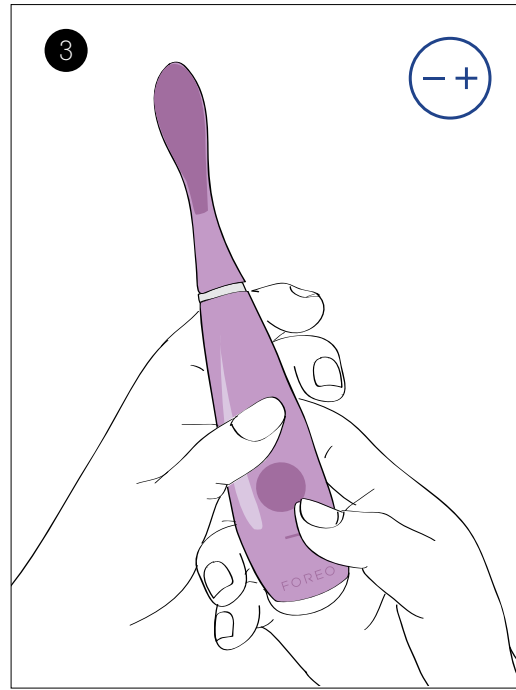


3. Stellen Sie Ihre bevorzugte Intensität durch Drücken der „+“ oder „-“ Taste ein.

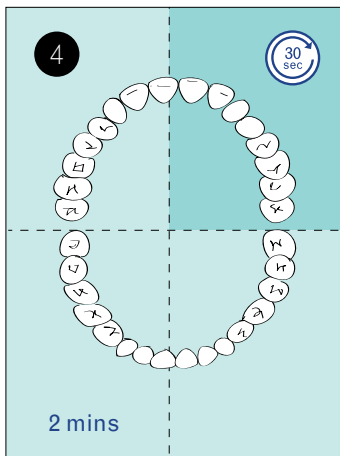

4. Alle 30 Sekunden unterbrechen die Pulsationen ganz kurz – es ist Zeit, zum nächsten Quadranten des Mundraums zu wechseln.

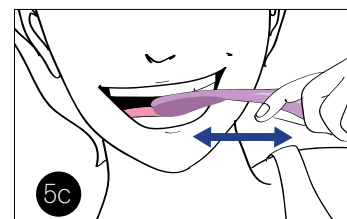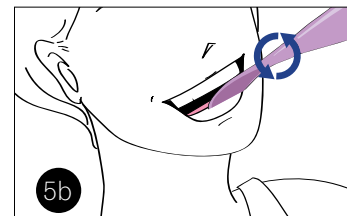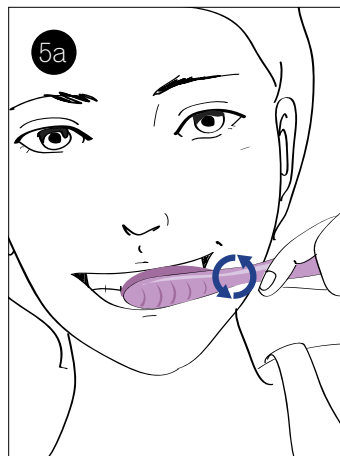

5. Putzen Sie jeden Quadranten in der gleichen Technik, wie mit einer manuellen Zahnbürste: in kreisenden Bewegungen vom Zahnfleisch zu den Zahnkanten - die Kauflächen, die Zahnflächen außen und die Innenflächen der Zähne. Im Anschluss nochmals mit horizontalen Putzbewegungen wiederholen.

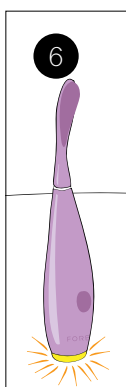

6. Nach 2 Minuten pausiert die Pulsation 3-mal kurz und das LED-Licht leuchtet auf – dies signalisiert das Ende der empfohlenen Putzroutine (Sie können die Zähne auch weiterhin putzen, wenn Sie möchten).

7. Drücken Sie die mittlere Taste, um auszuschalten und spülen Sie die Zahnbürste mit warmen Wasser ab. Wird die Taste nicht betätigt, schaltet sich die ISSA™ nach insgesamt 3 Minuten automatisch ab.

8. Nach dem Zähneputzen mit der ISSA™ empfehlen wir für eine komplette Zahnpflege die Verwendung von Zahnseide und Mundwasser.

Wenn Sie Blut auf der Bürstenoberfläche vorfinden, reinigen Sie das Gerät mit Wasser oder Silikonreinigungsspray. Sollten bei Ihnen mit dem FOREO Gerät Beschwerden auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.

## AUFLADUNG


Laden Sie Ihr FOREO Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Stecken Sie das Ladekabel an einen USB-Ladeanschluss. Das Anzeigeelement zeigt durch wiederholtes Blinken den Ladevorgang an, dieser Vorgang dauert etwa 1 Stunde. Wenn die Batterie aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.

Wenn der Akku schwach ist, beginnt die Anzeige wiederum zu blinken. Wenn der Akku leer ist, stoppt der Motor. Laden Sie das Gerät normal auf.

Verwenden Sie Ihr FOREO Gerät nicht während des Ladevorgangs und laden Sie es nicht länger als 24 Stunden.

Das Gerät kann bei voller Aufladung jeweils bis zu 365 Mal verwendet werden. Die Ladezeit beträgt 1 Stunde. Verwenden Sie nur das FOREO USB Ladekabel. Entfernen Sie das Ladekabel, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist.

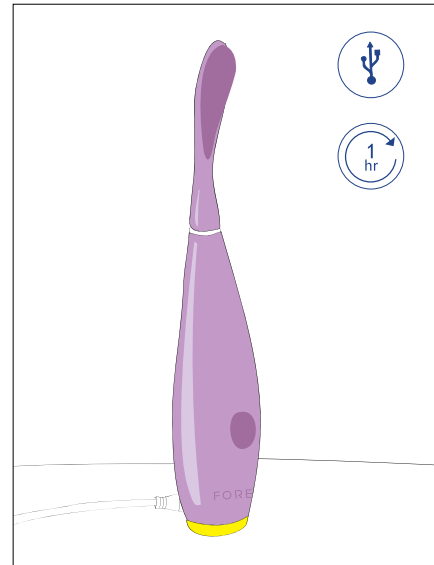

Die Batterielebensdauer beträgt 5 Jahre.

## REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

### REINIGUNG DES GERÄTES

Gilt für: Bürstenkopf (Oberteil) und Bürstengriff (Unterteil).

Reinigen Sie das Gerät durch Waschen mit warmen Wasser, während Sie mit Ihren Fingern durch die Borsten gleiten. Für ein optimales Reinigungsergebnis verwenden Sie FOREO Silikon-Reinigungsspray und spülen Sie das Gerät mit warmen Wasser ab. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

### PFLEGE UND SICHERHEIT

Vermeiden Sie die Benutzung von Zahnpasta mit Bleichmitteln mit Ihrem Gerät.

Bei Beschwerden jeglicher Art unterbrechen Sie bitte die Anwendung. Falls Sie sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Verwendung der Zahnbürste Ihren Zahnarzt konsultieren.

Personen mit Zahnimplantaten und Zahnersatz (Kronen, Brücken und Füllungen) können dieses Gerät benutzen. Wenn Sie spezifische Bedenken haben, fragen Sie bitte Ihren Zahnarzt um Rat.

Diese Zahnbürste ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Die Benutzung der Zahnbürste ist unter angemessener Aufsicht und ausführlicher Anleitung für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Kinder sollten nie mit dem Gerät spielen.

Gebrauchen Sie Ihr FOREO Produkt oder das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt sein sollte und verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel. Das Produkt ist nur für den Zweck, der im Handbuch beschrieben ist. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist.

Vermeiden Sie für das Gerät direkte Sonneneinstrahlung und ebenso extreme Hitze oder kochendes Wasser.

Umgebungsbedingungen für den Einsatz:  
 Temperatur: 5° bis 40° Celsius  
 Feuchtigkeit: 40 % bis 80 %  
 Luftdruck: 800 to bis 1060 hPa

Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport:  
 Temperatur: -10° bis 50° Celsius  
 Feuchtigkeit: 30 % bis 80 %  
 Luftdruck: 500 to bis 1060 hPa

## FEHLERBEHEBUNG

**Hinweise zur Vorsorge, sollten in der Anwendung mit dem Gerät Probleme auftreten**

**Die ISSA™ schaltet sich nach Drücken der mittleren Taste nicht an?**

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre ISSA™ auf.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Entsperren Sie sie, indem Sie die + und - Taste gleichzeitig drücken.

**Die ISSA™ lässt sich nicht einschalten und/oder die Funktionstasten reagieren nicht?**

- Der Mikroprozessor hat eine vorübergehende Fehlfunktion. Schließen Sie das Ladekabel an, um die Funktion wieder herzustellen.

**Das Kontrolllicht der ISSA™ blinkt nicht, sobald das Ladekabel angeschlossen ist?**

- Akku ist voll aufgeladen, bereit für bis zu 365 Anwendungen.
- Die Batterie ist leer und benötigt einige Minuten um das Ladekabel zu erkennen.
- Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie das USB-Kabel und den Ladeanschluss.

**Die ISSA™ ist ins Wasser gefallen und der Ladeanschluss wurde nass?**

- Einfach abtrocknen und weiterverwenden. Die ISSA™ ist absolut wasserdicht und der Ladeanschluss ist komplett abgedichtet.

Wenn sonstige Probleme mit Ihrer FOREO Zahnbürste auftreten oder wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter [www.foreo.com](http://www.foreo.com) und füllen Sie das Anfrageformular aus.

## GARANTIEHINWEISE

### 2-JAHRES-HERSTELLERGARANTIE

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Ersterwerbs – für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen.

Die Herstellergarantie umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHT abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Um Ihre Garantie zu beanspruchen, müssen Sie sich zunächst unter [www.foreo.com](http://www.foreo.com) registrieren und unter Ihrem Konto anmelden. Dann wählen Sie die Option „Garantie-Registrierung“. Sie erhalten im Anschluss eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorization Number (RMA), mit der Sie das FOREO Produkt zurücksenden können. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

### 10-JAHRES-QUALITÄTSGARANTIE

Als Verlängerung der Bedingungen der begrenzten zweijährigen Garantie von FOREO berechtigt die 10-Jahres-Qualitätsgarantie von FOREO den Besitzer zum Kauf eines neuen Gerätes unter [www.foreo.com](http://www.foreo.com) zu 50 % des Listenpreises. Die AGBs können Sie auf der KUNDENSERVICE Seite unter [www.foreo.com](http://www.foreo.com) einsehen.

\* Die 2-Jahres-Herstellersgarantie und 10-Jahres-Qualitätsgarantie gelten nicht für die Ersatzbürstenköpfe.



## ENTFERNUNG AKKU-BATTERIE

Da dieses Gerät mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist, muss diese Batterie vor der Entsorgung des Gerätes entfernt werden und sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie den Bürstenkopf ab, entfernen Sie die Silikonhülle, öffnen Sie bitte die Kunststoffschale und entfernen Sie die Batterie. Diese muss gemäß Ihrer örtlichen Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden. Tragen Sie während diesem Prozess zu Ihrer Sicherheit Schutzhandschuhe. Die visuelle Anleitung finden Sie unten.


Bitte beachten Sie, dass das Öffnen des Gerätes zum Erlöschen der Garantie führt. Diese Maßnahme darf nur vorgenommen werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.





1. Ziehen Sie den Bürstenkopf ab

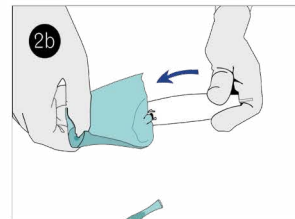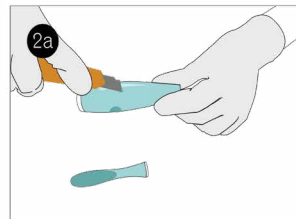



2. Schneiden Sie die Silikonhülle auf

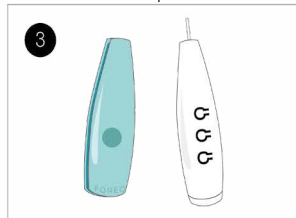




3. Ziehen Sie das Silikon ab

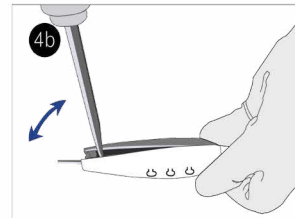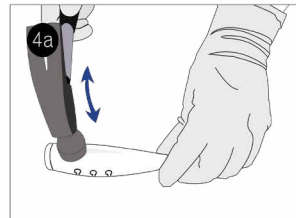

4. Spalten Sie die Kunststoffschale mit einem Hammer


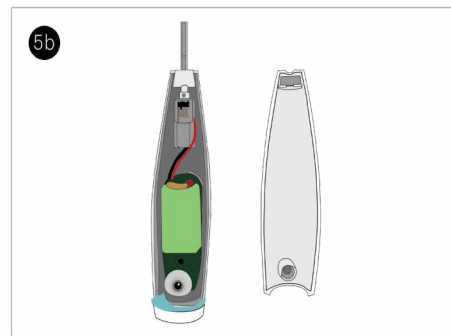
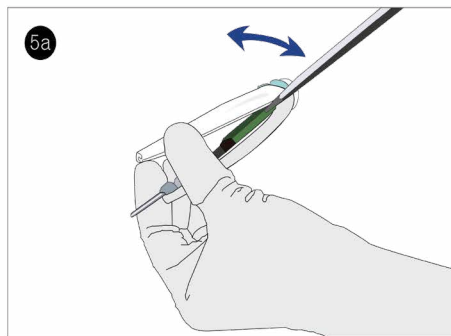


5. Öffnen Sie die Kunststoffschale mit einem Schraubenzieher

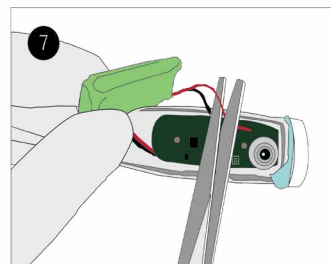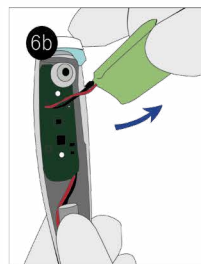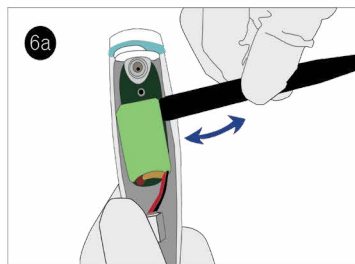

6. Entfernen Sie sorgfältig die Akkubatterie

7. Durchschneiden Sie zuerst das rote Kabel

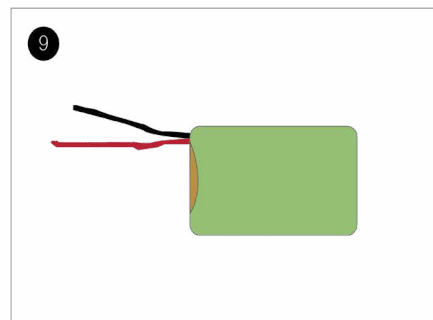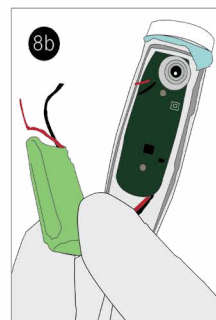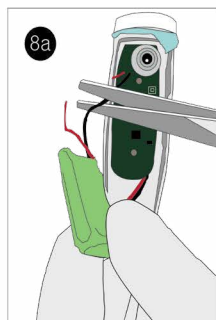

8. Anschließend dann das schwarze Kabel

9. Entsorgen Sie die Akkubatterie

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften).

Das durchgestrichene Müllcontainer-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer entsprechenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



1. Europäische Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.
2. Entspricht ANSI/AAMI STD. ES 60601-1 & zertifiziert CAN/CSA STD. C22.2 No.60601-1.
3. Entspricht der Gefahrstoffverordnung.
4. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
5. Berührungsschutz vom Typ BF.
6. Wasserdicht bis zu 1 m unter Wasser.
7. Anweisungen vor Gebrauch einsehen.

Entspricht ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD. 60601-1-11 Zertifiziert CAN/CSA STD. C22.2 No. 60601-1

**Verpackung enthält:** ISSA™, USB Ladekabel, Gebrauchsanweisung, Echtheitszertifikat und Reisetui

**Funktionsmodus:** Dauereinsatz

**Zielgruppe:** Erwachsene

**Empfohlene Einsatzorte:** Haushalte und Hotels

ISO 10993- und ISO 7405-zertifiziert

IPX7-Einstufung (geschützt beim Untertauchen im Wasser bis zu 1 m Tiefe)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>MATERIALS:</b>	Silikon
<b>GRÖSSE:</b>	195 x 32.4 mm
<b>GEWICHT:</b>	65.4 g
<b>BATTERIE:</b>	420 mAh
<b>BENUTZUNGSDAUER:</b>	bis zu 365 Mal pro Akkuladung
<b>STANDBY:</b>	180 Tage
<b>FREQUENZ:</b>	166 Hz
<b>MAX. SCHALLPEGEL:</b>	50 dB
<b>BEDIENFLÄCHE:</b>	3 Tasten

**Haftungsausschluss:** Die Verwendung dieses Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammen hängen.

Verbesserungen des Produktes können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2015 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DER EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DER USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

HERGESTELLT VON SUZHOU SVENTECH CO., LTD, 108, EAST UNIT, NO. 77, SU HONG MIDDLE ROAD, SIP, SUZHOU, JIANGSU, CHINA

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SWEDEN

WEBSITE WWW.FOREO.COM

[www.foreo.com](http://www.foreo.com)