

GC RELINE™ PRIMER R

RESIN PRIMER/ADHESIVE FOR VINYL POLYSILOXANE DENTURE LINER

GC RELINE™ MODIFIER

COATING MATERIAL FOR VINYL POLYSILOXANE DENTURE LINER

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- GC RELINE™ PRIMER R : Bonding of GC RELINE™ Soft or Extra Soft and MODIFIER to acrylic denture resin.
- GC RELINE™ MODIFIER : Coating of edges of GC RELINE™ Soft or Extra Soft and acrylic denture resin.

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.


DIRECTIONS FOR USE : GC RELINE™ PRIMER R

- Check and adjust the resin denture in normal manner.
- Relieve the area of the denture to be relined.
- Clean the denture with detergent and water and dry thoroughly. Apply GC RELINE™ PRIMER R (resin primer) to the bonding surface with a clean, dry brush and gently dry with clean, dry oil-free air. Do not contaminate the surface with latex gloves, etc. Note : Do not contaminate the bottle of PRIMER R with moisture. Otherwise the primer liquid may turn cloudy. Replace the cap immediately after use.
- Dispense GC RELINE™ Soft or Extra Soft material directly onto the denture. Seat the denture in the mouth for muscle trimming. Then remove it from the mouth and then progressively trim and polish the edge of the GC RELINE™ material. (See full instructions for use in GC RELINE™ Soft or Extra Soft package.)

DIRECTIONS FOR USE : GC RELINE™ MODIFIER

- If considered necessary to achieve an even smoother finish , apply PRIMER R to the peripheral borders and margins of the denture. Do not apply the primer to the GC RELINE™ Soft or Extra Soft material.
- After gently drying the primer(as in 3 above), apply the mixture of GC RELINE™ MODIFIER A and B to the edges of the previously placed GC RELINE™ material and the denture. (See full instructions for use in GC RELINE™ Soft or Extra Soft package.)

Illustrated technique

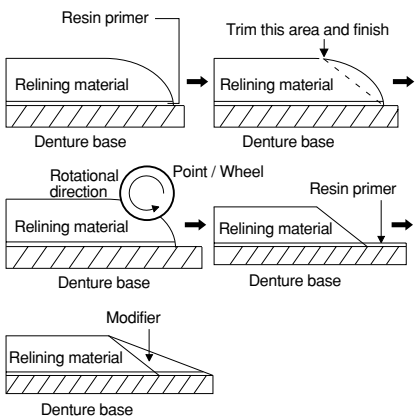

STORAGE

Store at room temperature 15 - 25°C (59 - 77°F) out of direct sunlight. (Shelf life : 2 years)

PACKAGES

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1pkg. A - 10g (9mL), B - 10g(9mL), Mixing pad (No.15), Sponge

CAUTION

- The primer is volatile and flammable. Do not use it near fire. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

GC RELINE™ PRIMER R

POLYVINYLSILOXAN-HAFTVERMITTLER FÜR DIE KUNSTSTOFFBASIS

GC RELINE™ MODIFIER

ABDECKMATERIAL FÜR DIE POLYVINYLSILOXAN-UNTERFÜTTERUNG

Nur von zahnärztlichem/zahntechnischem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- GC RELINE™ PRIMER R: Zur Haftung von GC RELINE™ Soft oder Extra Soft und GC RELINE™ MODIFIER an Prothesenkunststoffen.
- GC RELINE™ MODIFIER: Zum Finieren von Rändern von GC RELINE™ Soft oder Extra Soft und Prothesenkunststoffen.

GEGENANZEIGEN

In seltenen Fällen kann das Produkt bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen beobachtet werden, das Produkt nicht weiter anwenden und einen Arzt aufsuchen.


VERARBEITUNGSANLEITUNG: GC RELINE™ PRIMER R

- Die Prothese wie üblich prüfen und vorbereiten.
- Den zu unterfütternden Prothesenbereich freilegen.
- Die Prothese mit einem Reinigungsmittel und Wasser reinigen und sorgfältig trocknen. GC RELINE™ PRIMER R mit einem sauberen und trockenen Pinsel auf die Haftoberfläche auftragen und sanft trockenblasen. Die Oberfläche nicht mit Latex-Handschuhen usw. verunreinigen. Hinweis : GC RELINE™ PRIMER R nicht der Luftfeuchtigkeit aussetzen, da sonst die Primerflüssigkeit trübe wird und nicht mehr verwendet werden kann. Die Flasche nach Gebrauch sofort verschließen.
- GC RELINE™ Soft oder Extra Soft direkt auf die Prothese auftragen. Die Prothese in den Mund einsetzen und Mundmuskulbewegungen durchführen. Dann die Prothese wieder herausnehmen und die Ränder von GC Reline™ Soft oder Extra Soft mit einem scharfen Messer trimmen und polieren (siehe Gebrauchsanleitung von GC RELINE™ Soft oder Extra Soft.)

VERARBEITUNGSANLEITUNG: GC RELINE™ MODIFIER.

- Falls eine glattere Oberfläche gewünscht wird: GC RELINE™ PRIMER R auf die Kunststoffprothesenränder applizieren. Den Primer nicht auf das GC RELINE™ Soft oder Extra Soft Material auftragen.
- Primer sanft trockenblasen (siehe Punkt 3) und die Mischung von GC RELINE™ MODIFIER A und B auf die getrimmten Ränder von GC RELINE™ Soft oder Extra Soft und Prothesenkunststoff auftragen (siehe Gebrauchsanleitung von GC RELINE™ Soft oder Extra Soft).

Schematische Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte

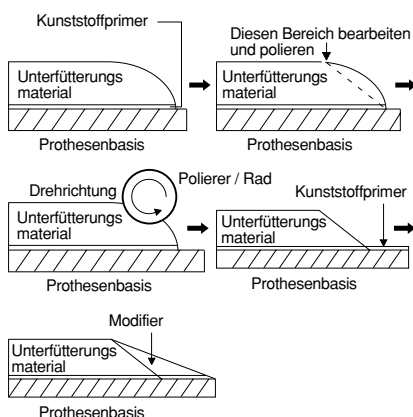

LAGERUNG

Bei normaler Raumtemperatur (15 - 25°) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. (Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

HANDELSFORMEN

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1 Packung Komponente A - 10g (9mL), Komponente B - 10g(9mL), Anmischblock (Nr. 15), Schwamm

ACHTUNG

- Der Primer ist flüchtig und entzündlich. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme verwenden.. Flasche sofort nach Gebrauch schließen und von Entzündungsherden fernhalten.
- Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

GC RELINE™ PRIMER R

PRIMER ADHESIF A LA RESINE POUR MATERIAU DE REBASAGE VINYL POLYSILOXANE

GC RELINE™ MODIFIER

AGENT PROTECTEUR POUR MATERIAU DE REBASAGE VINYL POLYSILOXANE

Ce produit est réservé à l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS

- GC RELINE™ PRIMER R : Adhésion du GC RELINE™ Soft ou Extra Soft et du MODIFIER (agent protecteur) aux prothèses en résine acrylique.
- GC RELINE™ MODIFIER : Finition des bords du GC RELINE™ Soft ou Extra Soft et des prothèses en résine acrylique.

CONTRE-INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner, chez certaines personnes, une réaction allergique. Si cela se produit, cessez d'utiliser ce produit et consulter un médecin.


MODE D'EMPLOI : GC RELINE™ PRIMER R

- Vérifier et ajuster la prothèse de façon habituelle.
- Dépolir la surface de la prothèse à rebaser.
- Nettoyer la prothèse avec du savon et de l'eau et sécher soigneusement appliquer le GC RELINE™ PRIMER R (primer adhésif à la résine) sur la surface à rectifier en utilisant un pinceau sec et propre et sécher doucement avec de l'air sec, exempt de toute trace d'huile. Ne pas contaminer la surface avec des gants en latex,... Note : Ne pas humidifier le flacon de PRIMER R. Le liquide deviendrait trouble. Remettre le capuchon aussitôt après utilisation.
- Appliquer le GC RELINE™ Soft ou Extra Soft directement sur la prothèse. Positionner la prothèse en bouche et effectuer des mouvements circulaires. Puis retirer doucement la prothèse et ajuster et polir les bords du matériau. (Pour plus de précisions, se référer au mode d'emploi du GC RELINE™ Soft ou Extra Soft).

MODE D'EMPLOI : GC RELINE™ MODIFIER

- Si une finition plus lisse vous paraît nécessaire, appliquer PRIMER R aux bords périphériques et aux marges de la prothèse. Ne pas appliquer de primer sur le GC RELINE™ Soft ou Extra Soft.
- Après avoir séché soigneusement le PRIMER R (comme mentionné dans la partie 3 ci-dessus), appliquer le GC RELINE™ MODIFIER A et B sur les bords du matériau de rebasage GC RELINE™. (Pour plus de précisions, se référer au mode d'emploi du GC RELINE™ Soft ou Extra Soft.)

Etapes de la procédure

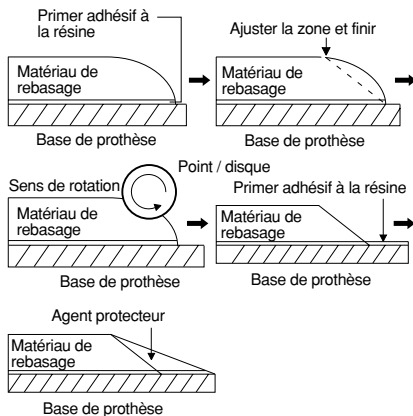

CONSERVATION

Conservé à température ambiante (15-25°C – 59-77°F) et à l'abri de la lumière. (2 ans de péremption)

CONDITIONNEMENT

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1pkg. A - 10g (9mL), B - 10g(9mL), bloc de mélange n°15, éponge

AVERTISSEMENTS

- Le primer est volatile et inflammable. Ne pas l'utiliser près d'une source de chaleur ou d'une flamme. Refermer immédiatement le flacon après chaque utilisation et éviter toutes sources de chaleur.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.

GC RELINE™ PRIMER R

PRIMER/ADESIVO DA RESINA PER RIBASANTE IN VINILPOLISILOSSANO RESIN

GC RELINE™ MODIFIER

LACCA PER RIBASANTE IN VINILPOLISILOSSANO

Prodotto per uso esclusivamente odontoiatrico professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- GC REALINE™ PRIMER R : usato come legante del GC RELINE™ Soft o Extra Soft e del MODIFIER con la resina acrilica per protesi mobili.
- GC RELINE™ MODIFIER : usato per la finitura dei bordi del GC RELINE™ Soft o Extra Soft e della resina acrilica per protesi mobili.

CONTROINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può causare reazioni di sensibilizzazione in alcune persone. Se si verifica questa reazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.


ISTRUZIONI PER L'USO : GC RELINE™ PRIMER R

- Controllare e adattare la protesi nel modo normale.
- Scaricare l'area della protesi da ribasare.
- Pulire la protesi con detergente e acqua e asciugarla completamente. Applicare il GC RELINE™ PRIMER R (resin primer) alla superficie utilizzando un pennello pulito e asciutto e asciugare delicatamente con aria pulita e priva di olio. Evitare di contaminare la superficie con guanti in lattice, ecc. ... Nota : Non contaminare il flacone di PRIMER R con umidità, altrimenti il primer liquido potrebbe opacizzarsi. Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso.
- Distribuire il materiale GC RELINE™ Soft o Extra Soft direttamente sulla protesi. Posizionare la protesi in bocca e chiedere al paziente di assestarla tramite azione della muscolatura. Quindi, estrarla dalla bocca, rifinirla progressivamente e lucidare i bordi del materiale GC RELINE™. (Consultare le istruzioni complete per l'uso contenute nella confezione di GC RELINE™ Soft o Extra Soft).

ISTRUZIONI PER L'USO : GC RELINE™ MODIFIER

- Se si ritiene necessaria una finitura ancora più liscia, applicare il PRIMER R sui bordi e sui margini periferici della protesi. Non applicare il primer al materiale GC RELINE™ Soft o Extra Soft.
- Dopo aver asciugato delicatamente il primer (come al precedente punto 3), applicare la miscela di GC RELINE™ MODIFIER A e B sui bordi del materiale GC RELINE™ precedentemente applicato e sulla protesi. (Consultare le istruzioni per l'uso complete incluse nella confezione del GC RELINE™ Soft o Extra Soft).

Schema dei passaggi della procedura

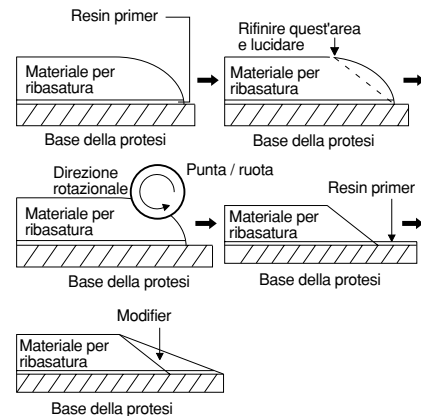

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura normale 15-25°C (59-77°F), lontano dalla luce solare diretta. (Durata del prodotto : 2 anni)

CONFEZIONI

- GC RELINE™ PRIMER R Primer da 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER confezione 1-1. A - 10g (9mL), B - 10g (9mL), tavoletta di miscelazione (N° 15), 1 scatola di spugne

AVVERTENZA

- Il primer è volatile ed infiammabile. Non utilizzare nelle vicinanze di fiamme. Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso e tenere lontano da fonti di accensione.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico.

GC RELINE™ PRIMER R
PREPARADOR/ADHESIVO A RESINA
PARA REBASES DE POLISILOXANO DE VINILO

GC RELINE™ MODIFIER

RECUBRIMIENTO PARA REBASES DE POLISILOXANO DE VINILO

Para uso exclusivo de profesionales dentales como recomiendan las indicaciones.

INDICACIONES RECOMENDADAS

- GC RELINE™ PRIMER R : unión de GC RELINE™ Soft o Extra Soft y MODIFIER a resina acrílica para dentaduras.
- GC RELINE™ MODIFIER : Acabado de bordes de GC RELINE™ Soft o Extra Soft y resina acrílica para dentaduras.

CONTRAINDICACIONES

En casos excepcionales el producto puede producir sensibilidad en algunas personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del producto y dirigirse a un médico.

INSTRUCCIONES DE USO :

GC RELINE™ PRIMER R


- Compruebe y ajuste la dentadura como es habitual.
- Esmerilar el area de la dentadura a rebasar.
- Limpie la dentadura con detergente y agua, y seque bien. Aplicar GC RELINE™ PRIMER R (preparador-adhesivo a resina) a la superficie de unión utilizando un pincel seco y limpio y seque con bastante aire seco, limpio y sin aceites. No contamine la superficie con guantes de latex, etc...
Nota : No contamine el frasco del PRIMER R con crema. De lo contrario el líquido podría enturbiarse. Coloque el tapón inmediatamente después de su uso.
- Aplique GC RELINE™ Soft o Extra Soft directamente sobre la Dentadura. Coloque la dentadura en la boca y efectue movimientos circulares. Entonces retirelo de la boca y recorte y pula progresivamente e borde del material GC RELINE™ material. (Ver instrucciones de uso en el envase de GC RELINE™ Soft o Extra Soft).

INSTRUCCIONES DE USO :

GC RELINE™ MODIFIER

- En caso de considerar necesaria la obtención de un acabado fino, aplicar PRIMER R a los bordes periféricos y márgenes de la dentadura. No aplicar el preparador-adhesivo sobre el material GC RELINE™ Soft o Extra Soft.
- Después de secar suavemente el preparador-adhesivo (como se indicaba en el punto 3) , aplicar la mezcla del GC RELINE™ MODIFIER A y B a los bordes donde previamente colocó el material GC RELINE™ y a la dentadura. (Ver instrucciones completas de uso en el envase de GC RELINE™ Soft o Extra Soft.)

Esquema del procedimiento a seguir

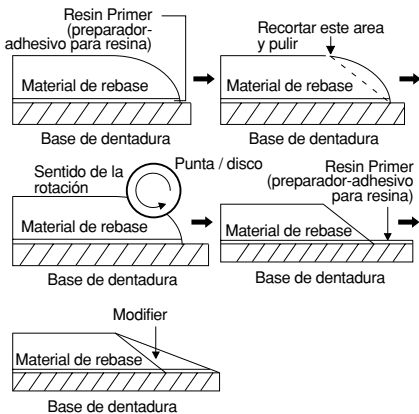

CONSERVACION

Guardar a temperatura normal 15-25°C (59-77°F) y preservar de la luz solar directa (Duración : 2 años)

ENVASES

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER paquete 1-1 A - 10g (9mL), B - 10g(9mL), bloc de mezclas (n°15), esponja

AVISO

- El Primer es volátil e inflamable. No utilizar cerca de fuego. Cierre el frasco inmediatamente después de su utilización y mantengalo alejado de fuentes de calor.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y buscar asistencia médica.

GC RELINE™ PRIMER R
PRIMER/ADHESIEF VOOR VINYL
POLYSILOXAAN RELINING MATERIAAL

GC RELINE™ MODIFIER

COATING VOOR VINYL POLYSILOXAAN RELINING MATERIAAL

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN

- GC RELINE™ PRIMER R : Voor het hechten van GC RELINE™ Soft of Extra Soft en MODIFIER aan prothesekunststof.
- GC RELINE™ MODIFIER : Voor het afwerken van randen van GC RELINE™ Soft of Extra Soft en van de prothesekunststof.

CONTRA- INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

GEbruIKSAANWIJZING :

GC RELINE™ PRIMER R


- Controleer en pas de prothese aan op de gebruikelijke wijze.
- Maak ruimte op de plaats waar de voering moet worden aangebracht.
- Reinig de prothese met een zeepoplossing en maak goed droog. Breng met een schone, droge penseel GC RELINE™ PRIMER R (kunststof primer) aan op het hechtvlak en droog voorzichtig met olievrrije lucht. Contamineer het oppervlak niet met latex handschoenen etc. Opmerking : Verontreinig de fles PRIMER R niet met vocht. Anders wordt de Primer vloeistof troebel. Na gebruik de fles goed sluiten.
- Breng het GC RELINE™ Soft of het Extra Soft materiaal rechtstreeks op de prothese aan. Breng de prothese aan in de mond en laat functionele bewegingen te maken. Neem de prothese uit de mond en verwijder de overmaat aan GC RELINE™ materiaal en polijst de randen. (Zie ook de gebruiksaanwijzing in de GC RELINE™ Soft of de Extra Soft verpakking).

GEbruIKSAANWIJZING :

GC RELINE™ MODIFIER

- Indien het wenselijk wordt geacht om nog gladder af te werken, breng dan PRIMER R op de perifere grenzen en randen van de prothese aan. Breng geen primer aan op het aangebrachte GC RELINE™ Soft of Extra Soft materiaal.
- Nadat de primer voorzichtig is gedroogd (als genoemd bij punt 3), brengt men het mengsel van GC RELINE™ MODIFIER A en B aan op de randen van zowel het eerder aangebrachte GC RELINE™ materiaal, als van de prothese zelf. (Zie de volledige gebruiksaanwijzing in de GC RELINE™ Soft of de Extra Soft verpakking.)

Diagram voor de stappen in de procedure

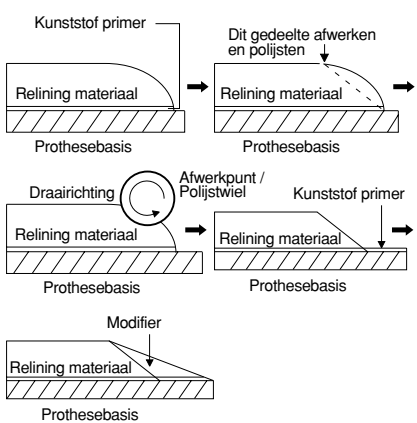

OPSLAG

Bewaar bij normale temperatuur, 15-25°C (59-77°F) buiten bereik van direct zonlicht. (Houdbaarheid : 2 jaar)

VERPAKKINGEN

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1 verpakking A - 10g (9mL), B - 10g(9mL), 1 mengblok (No. 15), sponsje

WAARSCHUWING

- De primer is vluchtig en ontvlambaar. Gebruik het niet in nabijheid van vuur. Sluit het flesje direct na gebruik en houd het verwijderd van ontstekingsbronnen.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

GC RELINE™ PRIMER R
RESIN PRIMER/ADHÆSIV TIL
A-SILIKONEBASEREDE REBASERINGER

GC RELINE™ MODIFIER

FORSEGLINGSMATERIALE TIL
A-SILIKONEBASEREDE REBASERINGER

Må kun benyttes af tandlæger/teknikere, til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- GC RELINE™ PRIMER R : Binding mellem RELINE™ Soft eller Extra Soft og MODIFIER til akrylbaserede protesematerialer.
- GC RELINE™ MODIFIER : Finishering af overgangen mellem GC RELINE™ Soft eller Extra Soft og akrylbaserede protesematerialer

KONTRAIKATIONER

Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

BRUGSANVISNING :

GC RELINE™ PRIMER R


- Kontroller og justér protesen på sædvanlig måde
- Aflast de områder af protesen der skal rebaseres
- Rengør protesen med sæbe, skyl med vand og tør omhyggeligt. Påfør GC RELINE™ PRIMER R (resin primer) på den rebaseringskrævende del af protesens overflade med en ren, tør børste, og lufttør herefter med ren tør og oliefri luft. Overfladerne må ikke kontamineres med latexhandsker, etc. N:B : Sæt altid hættten på flasken umiddelbart efter brug, idet væsken (Primer R) vil blive uklår, såfremt den udsættes for længerevarende luftfugtighed.
- Applícér GC RELINE™ Soft eller Extra Soft materiale direkte på protesen. Placer protesen i munden og foretag muskeltrimning. Fjern protesen og trim og polér kanterne af GC RELINE™ materialet. (Se brugsanvisningen til GC RELINE™ Soft eller Extra Soft).

BRUGSANVISNING :

GC RELINE™ MODIFIER

- Såfremt der ønskes en glattere overflade påføres PRIMER R til de perifere grænser og kanter af protesen, for at binde protesen til GC RELINE™ MODIFIER. Kom ikke Primer R på GC RELINE™ Soft eller Extra Soft materialet.
- Efter forsigtigt, at have pustet primeren tør (se punkt 3), appliceres blandingen af GC RELINE™ MODIFIER A og B på kanten af det tidligere applicerede GC RELINE™ materiale, og på protesen. (Se brugsanvisningen til GC RELINE™ Soft eller Extra Soft.)

Skematisk oversigt over fremgangsmåden

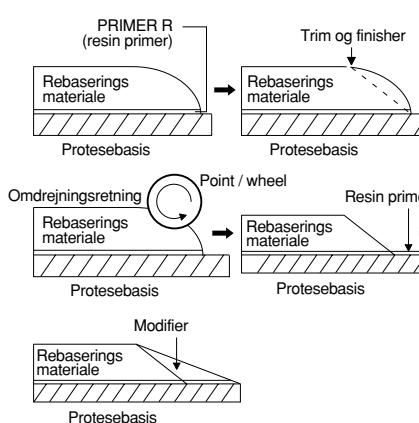

OPBEVARING

Opbevares ved stuetemperatur 15-25°C (59 - 77°F) Beskyttes mod direkte sollys. (Kan lagres i 2 år)

PAKNINGER

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1 pakning A - 10g (9mL), B - 10g(9mL) Blandeblok nr. 15 Minisvampe

ADVARSEL

- Primeren er flygtig og letantændelig, og må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild. Luk flasken med Primer R omhyggeligt efter brug.
- I tilfælde af, at materialet kommer i øjnene, skylles omgående med vand og det anbefales, at konsultere en læge.

GC RELINE™ PRIMER R
RESINPRIMER/ADHESIV FÖR
A-SILIKONBASERADE REBASERINGAR

GC RELINE™ MODIFIER

YTFÖRSEGLINGSMATERIAL FÖR
A-SILIKONBASERADE REBASERINGAR

Endast avsett att användas av behörig person för rekommenderat ändamål.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- GC RELINE™ PRIMER R : Bindning av GC RELINE™ Soft eller Extra Soft och MODIFIER till akrylbaserade protesbasmaterial.
- GC RELINE™ MODIFIER : för kantrimning av GC RELINE™ Soft eller Extra Soft och akrylatbaserade protesbasmaterial.

KONTRAIKATIONER

I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt hänvisa patienten till en dermatologisk läkarmottagning.

INSTRUKTIONER :

GC RELINE™ PRIMER R


- Kontrollera och justera protesen med sedvanlig metod.
- Avlasta de områden av protesen som skall rebaseras.
- Rengör protesen med rengöringsmedel och vatten och torka sedan omsorgsfullt. Applicera GC RELINE™ PRIMER R (resin primer) på aktuella områden med en ren, torr pensel och lufttorka sedan med ren, torr oljefri luft. Kontaminera inte ytan med gummihandskar o.dyl. Observera: Kontaminera inte PRIMER R vätskan med fukt. Om vätskan kontamineras, kommer PRIMERN inte längre vara klar. Se till att locket omedelbart skruvas på flaskan efter användning.
- Dosera GC RELINE™ Soft eller Extra Soft material direkt på protesen. Placera protesen i munnen. Utför önskade munrörelser. Avlägsna från munnen och trimma kanterna av GC RELINE™ materialet. (Se detaljerade bruksanvisning gällande GC RELINE™ Soft eller Extra Soft package).

INSTRUKTIONER:

GC RELINE™ MODIFIER

- Om det anses önskvärt att erhålla en ytterligare förbättrad yta, applicera PRIMER R på de perifera gränserna av protesebasen, i syfte att binda protesen till GC RELINE™ MODIFIER. Se till att primern inte kommer i kontakt med GC RELINE™ Soft eller Extra Soft materialen. Torrlägg försiktigt PRIMER R (se punkt 3 ovan).
- Efter försiktig torrblåstring av primern (se punkt 3 ovan), applicera blandningen av GC RELINE™ MODIFIER A och B på kanterna av det tidigare applicerade GC RELINE™ materialet och på protesen. (Se den detaljerade bruksanvisningen för GC RELINE™ Soft eller Extra Soft fp.)

Illustrerade teknik

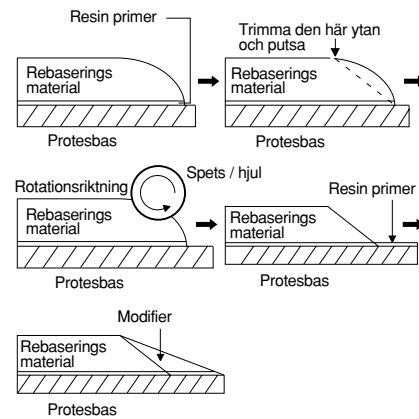

FÖRVARING

Förvaras i skydd från direkt solljus i normal rumstemperatur (15 - 25°C / 59 - 77°F). (Kan lagras under 2 år)

FÖRPAKNINGAR

- GC RELINE™ PRIMER R Primer 12g (13mL)
- GC RELINE™ MODIFIER 1-1 förpackning A - 10g (9mL), B - 10g(9mL), blandningsblock Nr.15, engångssvampar.

VARNING

- Primern är lättflyktig och lättantändlig. Hantera den inte i närheten av eld. Förslut flaskan omedelbart efter användning och förvara den på ett brandsäkert sätt.
- Om materialen kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och sök läkarhjälp.



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285, Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, 13 Interleuvenlaan, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

EEC registered manufacturer



GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven