


perfekte Lachen



NSK

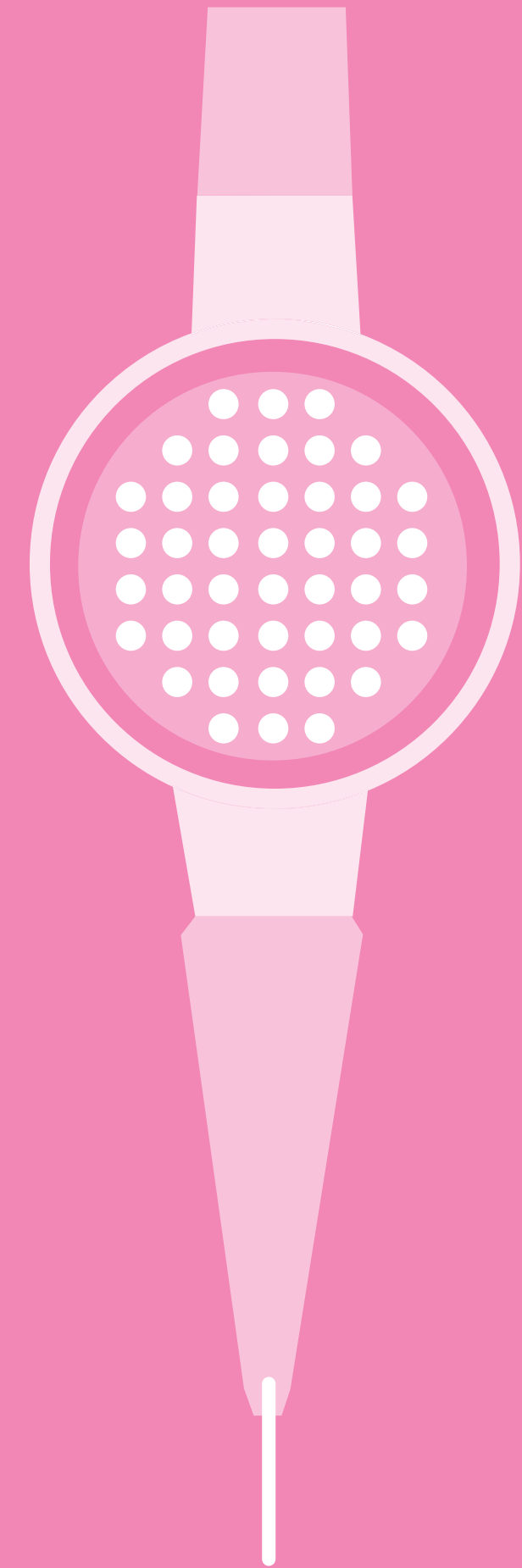

FLASH pearl


MUNDHYGIENE PRODUKT

NSK

Prophy-Mate **neo**



MUNDHYGIENE PRODUKT

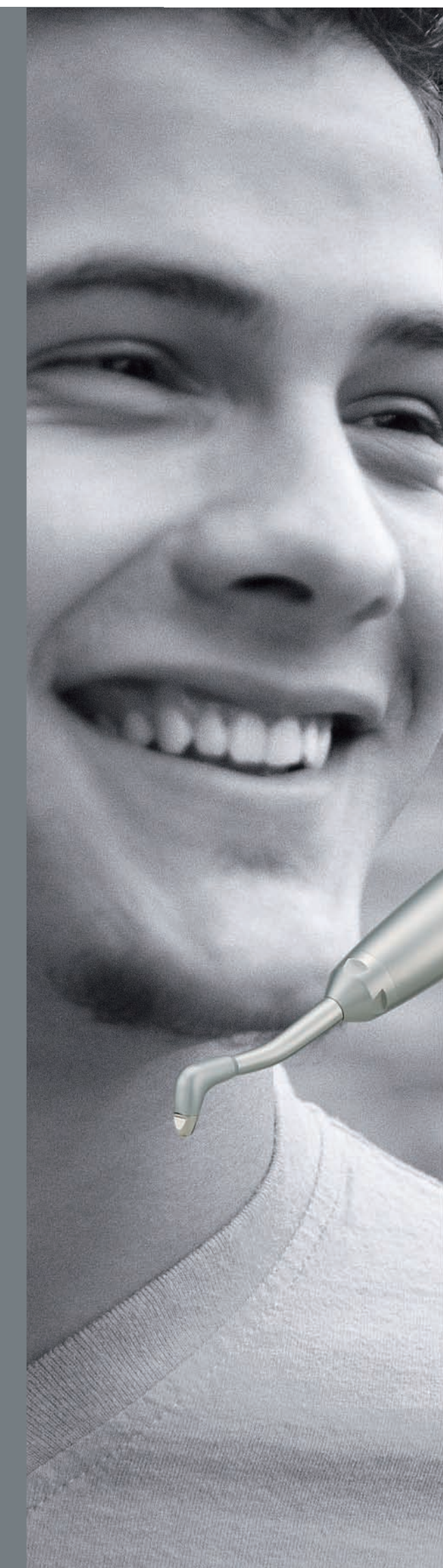

Für das pe



Prophy-Mate
neo



Luftgetriebenes Zahnpolitursystem

Das verbesserte Prophy-Mate **neo** kombiniert Form und Funktionalität für einfachere Anwendung. Durch hervorragende Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte Pulverkammer ist das Prophy-Mate **neo** bequem zu halten, während sich die Original-NSK-Handstückkupplung selbst bei hohem Luftdruck frei um 360° drehen lässt. Ermüdungsfreier Betrieb verkürzt den Zeitaufwand für die Entfernung von Plaque und Verfärbungen. Düsen mit Abwinkelung von 60° und 80° sind im Paket enthalten.

Anwendungen

- Entfernen von Plaque und Verfärbungen
- Reinigung
- Vorbereiten von Schmelz, Dentin und Keramik vor dem Bonding
- Vorbereiten von Fissurenversiegelungen

Vorteile

- Robust und zuverlässig, dadurch Zeitersparnis
- Einfacher Betrieb
- Einfache Wartung
- Schnelle Verbindung mit den wichtigsten Turbinenkupplungen
- Freie Wahl zwischen Düsen mit 60° und 80° Abwinkelung



Prophy-Mate neo grau

Merkmale




Ergo-Comfort Design

Leichtes, kompaktes Design und gut durchdachte Gewichtsbalance ermöglichen einfache Handhabung mit minimaler Erschöpfung von Hand und Handgelenk, um eine gründliche Behandlung zu gewährleisten.



Einfaches direktes Aufsetzen

Das neue Prophy-Mate **neo** wurde für direktes Aufsetzen auf NSK-Kupplungen und Luftturbine-Kupplungen aller gängigen Hersteller entwickelt.

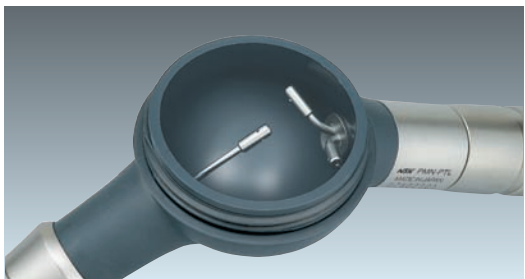


Verbesserte Polierleistung

Mit der Original-NSK-Doppeldüse wird eine höhere Polierleistung erreicht. Durch den leistungsstarken Pulverstrahl wird die Reinigungszeit und damit die Behandlungszeit deutlich verkürzt.

Prophy-Mate neo Komplettsystem


Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.	Modell	Bestell-Nr.
NSK	Y135-029	NSK	Y135-030	KaVo®	Y135-031	Sirona®	Y135-032	W&H®	Y135-033	Bien-Air®	Y135-034	M4	Y135-035	B2	Y135-036
NSK	Y135-029	NSK	Y135-030	KaVo®	Y135-031	Sirona®	Y135-032	W&H®	Y135-033	Bien-Air®	Y135-034	M4	Y135-035	B2	Y135-036

Komplettsystem enthält: • Prophy-Mate neo Handstück mit 60°- und 80°-Düsen • Reinigungsbürste, Draht und Düsendraht • 5 St. x 15 g Beutel FLASH pearl Reinigungspulver • Pulverbehälterdeckel • Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse

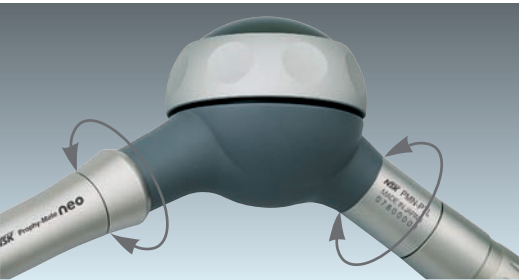


Reibungslose, leichtgängige 360°-Drehkupplung

Doppelgelenke drehen sich zur einfachen Anwendung reibungslos um 360° und reagieren so flexibel auf feinste Bewegungen der Fingerspitzen mit müheloser Anpassung des Anstellwinkels der Arbeitsspitze.

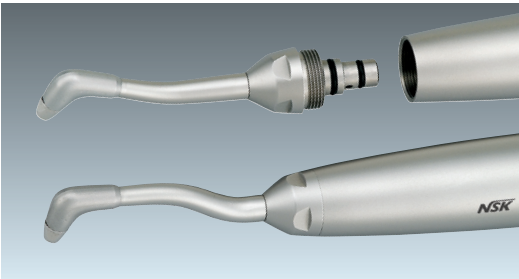

Einfach abnehmbare Düsen mit 60°- und 80°-Winkel

Auswahl zwischen Düsen mit 60° und 80° maximiert die Reinigungsfähigkeit. Die 60°-Düse arbeitet besonders gut im Molarenbereich sowie auf Kauflächen und die 80°-Düse an Frontzähnen.

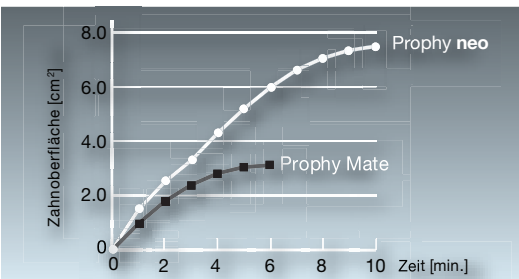

Stabile Leistung

Dank seines leistungsstarken Strahls aus der Doppeldüse sorgt das Prophy-Mate **neo** für stabile Polierkraft. Da die starke Polierleistung aufrechterhalten werden kann, wird eine effektive Behandlung erreicht.

Prophy-Mate **neo**

Der schonende Weg zu einem strahlenden Lächeln

FLASH pearl, das Reinigungspulver von Prophy-Mate, besteht aus speziell entwickelten kugelförmigen Partikeln, die glatt über Zahnoberflächen rollen und für eine schnelle Reinigung in alle Nischen eindringen. Die Kugelform des Granulats verringert die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung von Zähnen und Weichgewebe während der schnellen und sicheren Entfernung von Verfärbungen, Plaque und Zahnstein. Die Grundlage von FLASH pearl ist natürlich schmeckendes Kalzium, das zur geringen Wartungsanfälligkeit des Prophy-Mate beiträgt, da es keine Klumpen bildet, die die Düse verstopfen. Das Pulver reduziert außerdem den Säuregehalt der Mundflüssigkeit und hemmt die bakterielle Entwicklung bei gleichzeitiger Verringerung der Plaquebildung. Das Produkt eignet sich ideal für die Zahnreinigung bei Patienten, die überempfindlich gegen Natriumbikarbonat sind oder an hohem Blutdruck leiden.

* Unerwünschte Reaktionen auf dieses Produkt sind selten.




- Ansprechend verpackt in einer handlichen, originalen Dose
- Enthält 100 x 15 g-Beutel

Vorteile


- Kraftvolle Reinigung
- Sanft & schonend
- Natriumfreier natürlicher Geschmack
- Biologisch abbaubar und nicht verstopfend
- Geeignet für Luftpoliturssysteme aller gängigen Hersteller

Die Granulatkügelchen beseitigen Rückstände aus jeder unzugänglichen Stelle des Gebisses

FLASH pearl Granulat ist im Vergleich zu Partikeln von Natriumbikarbonat-Pulver klein und kugelförmig geformt. Das bedeutet mehr Kontakt und besseren Zugang zur effektiven Reinigung aller Zielregionen. Ein größerer Arbeitswinkel sorgt außerdem für höhere Behandlungssicherheit.

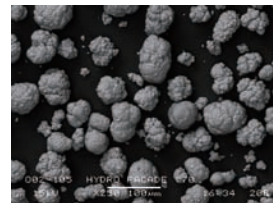


Kalzium

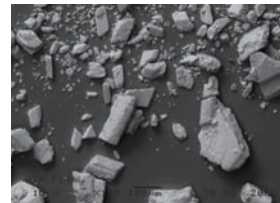

Konventionelles Natrium-Bikarbonat-Pulver

Ein neues effektives Reinigungssystem

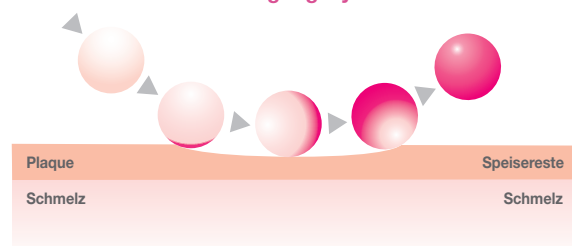

FLASH pearl rollt glatt über die Zahnoberflächen

Die Kugelform von FLASH pearl ergibt im Vergleich zu den Effekten der scharfkantigeren Partikel von Natriumbikarbonat einen glatten Oberflächenglanz der Zähne. FLASH pearl lässt Zähne glänzen, ohne den Zahnschmelz zu beschädigen.



Keine Schädigung




Schmelzschaden

FLASH pearl vermeidet Schädigung der Oberfläche

Konventionelles Bicarbonat




Einfach zu warten

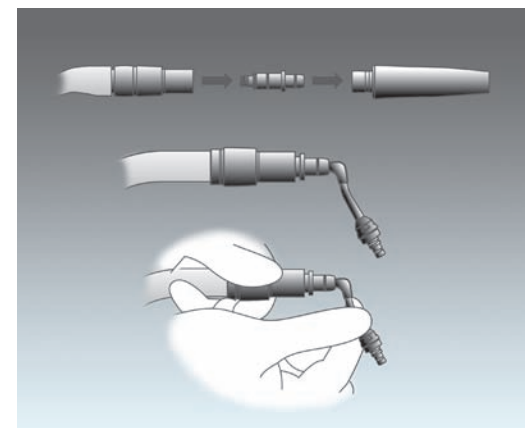

Mit einer Luftausblasdüse kann das Gerät einfach gereinigt werden, und gründliche Reinigung verhindert ein Verklumpen. Luftausblasdüsen für alle Kupplungstypen sowie Reinigungsbürste und -drähte sind im Paket enthalten.

Empfohlene Düsenposition

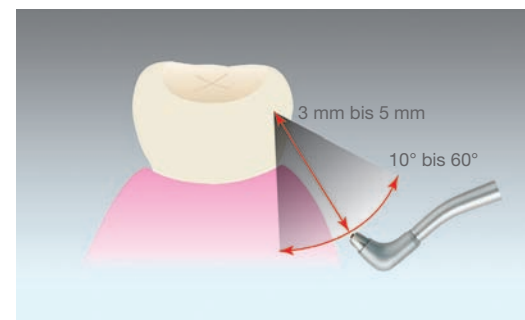

Eine effektivere Reinigung kann erreicht werden, wenn die Düse stets in einem Winkel zwischen 10° und 60° und einem Abstand von 3-5 mm zur Zahnoberfläche gehalten wird. Dieser Winkel unterscheidet sich von dem bei konventionellen Reinigungspulvern auf dem Markt; das Abrollverhalten der kugelförmigen Partikel von FLASH pearl wird durch Halten der Düse in diesem Winkelbereich optimiert. Das Spray kann von der okklusalen Fläche zum zervikalen Rand des Zahnes appliziert werden.

Ersatzteile

PMN-HP ■ Handstück mit 60°-Düse	Bestell-Nr. T797-010
Pulverbehälterdeckel (neo)	Bestell-Nr. T798-133
FLASH pearl ■ 100 Packungen je Karton	Bestell-Nr. Y900-693
FLASH pearl (Flasche) ■ Enthält 4 x 300 g	Bestell-Nr. Y900-698
PTL O-Ring Satz ■ Packung 5 Stück	Bestell-Nr. Y900-580
PTL O-Ring Satz ■ Packung 3 Stück	Bestell-Nr. Y900-054

O-Ring ■ Vorderende Düse	Bestell-Nr. 0312039 070
O-Ring ■ Hinterende Düse	Bestell-Nr. 0312029 070
Düse 60° (neo)	Bestell-Nr. T797-012
Düse 80° (neo)	Bestell-Nr. T797-013
Ringschlüssel (neo)	Bestell-Nr. T797-601
Luftausblasdüse-PTL (neo)	Bestell-Nr. T798-094

Dichtung (neo)	Bestell-Nr. T798-135
Schmieröl	Bestell-Nr. Z016-112
Reinigungsdraht (neo)	Bestell-Nr. T798-090
Düsendraht, lang (neo)	Bestell-Nr. T798-095
Düsendraht, kurz (neo)	Bestell-Nr. T798-091
Reinigungsbürste (neo)	Bestell-Nr. T798-092

Prophy-Mate neo Technische Daten

■ Handstück mit 80°-Düse	■ Handstück mit 60°-Düse
Länge: 173,9 mm Gewicht: 134,9 g	Länge: 171,4 mm Gewicht: 134,8 g

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Ely, Beaumont-Strasse 8
60760 Eschborn
Germany
TEL: +49 (0)6196 77006-0
FAX: +49 (0)6196 77006-20

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

885 PR-03843 Ver. 2 09.07.03.01